


Anleitung zum Import der KISS-Definitionen

Der Import der aktuellen KISS-Definitionen ist nur dann erforderlich, wenn die aktuellen Formulierungen zu den Harnwegsinfektionen (D1 – D3) verwendet werden sollen. Zusätzlich beinhaltet der Import auch alle anderen KISS-Definitionen, wie z.B. H1 oder G1.

Zum Import der Kataloge ist der Hybase Administrator **ab** Version V6.2017.12.R01 erforderlich. Die Version wird im Administrator am rechten oberen Rand des Startbildschirmes angezeigt.

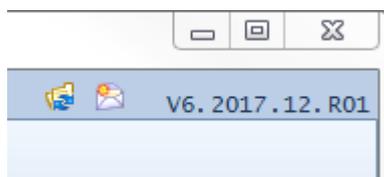

Die KISSRefdaten/KISS-Definitionen, die aktuelle Hybase Version sowie die jeweiligen Dokumentationen können im Downloadbereich auf unserer Internetseite <http://www.epinet.de> heruntergeladen werden.

Die zwei Kernthemen zum Import:

- 1) Einspielen der KISS-Definitionen
- 2) bei Bedarf: Anpassen der Infektionsbögen

Teil 1

Einspielen der KISS-Definitionen:

- **Datensicherung**

Vor dem Einspielen der KISS-Definitionen ist keine außerplanmäßige Datensicherung erforderlich.

- **KISS-Definitionen einspielen**

Wenn das Hybase-Update bereits erfolgreich durchgeführt wurde, befindet sich die Datenbank für die KISS-Ref.-Daten und KISS-Definitionen bereits in Ihrer Hybase-Verzeichnisstruktur und muss nicht separat heruntergeladen werden.

Hybase Kataloge

KISS Definitionen

Um die Aktualisierung der KISS-Definitionen zu starten, muss zunächst der Hybase Administrator geöffnet werden. Im Reiter Administration befindet sich der Menüpunkt Systemeinstellungen.

The screenshot shows the 'Systemeinstellungen' (System Settings) dialog box in the Hybase Administrator. The 'KISS' section is active, displaying several tables that map KISS infection codes to Hybase infection codes. At the bottom of this section, a button labeled 'KISS-/CDC-Definitionen importieren und verknüpfen' is highlighted. The background shows a dashboard with various reports, including 'Pat mit Erstdiagnose' and 'Anz. Pat mit Erstdiagnose'.

ITS KISS		HyBASE® Infektion	
KISS Infektion			
Harnwegsinfektion	H	Harnwegsinfektion	
Sepsis	S	Bakteriämie / Sepsis	
Atemwegsinfektion	P	Pneumonie	
Meningitis	INFZN	Infektion des zentralen Nervensystems	

STATION KISS		HyBASE® Infektion	
KISS Infektion			
Harnwegsinfektion	H	Harnwegsinfektion	
Gefäßkatheter-ass. Infektionen			
Sepsis	S	Bakteriämie / Sepsis	
Arterien-/Veneninfektion			
Atemwegsinfektion	P	Pneumonie	


OP KISS		HyBASE® Infektion	
KISS Infektion			
Wundinfektion	C	Chirurgische Wundinfektion	

NEO KISS		HyBASE® Infektion	
KISS Infektion			
NEO Sepsis	SNEO	Sepsis Neonatologie	
NEO Atemwegsinfektion	PNEO	Pneumologie Neonatologie	
NEC	NEC	Nekrotisierende Enterocolitis	


AMBU KISS		HyBASE® Infektion	
KISS Infektion			
Wundinfektion	C	Chirurgische Wundinfektion	

Im folgenden Dialog muss dann im Bereich „KISS“ der Button „KISS-Definitionen importieren und verknüpfen“ ausgewählt werden.

Wenn die Änderungen der KISS-Definitionen im Dezember 2016 nicht ins Hybase System importiert wurden oder immer noch Veränderungen einiger Texte der KISS-Definitionen bestehen, erscheint ein Auswahldialog zur Übernahme der geänderten Texte.

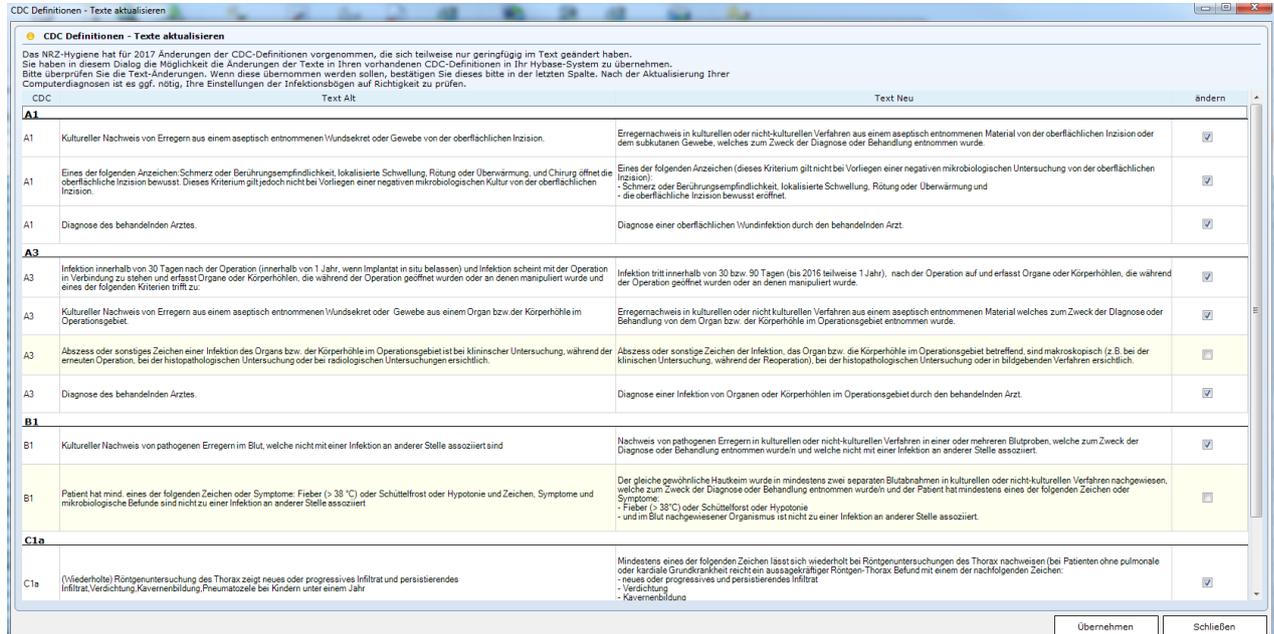

Der Dialog zeigt den aktuell vorhandenen Text sowie die Änderung nach der Anpassung. Wenn der Text übernommen werden soll, muss dieses durch Aktivieren des Kontrollkästchens am Ende jeder Zeile bestätigt werden.

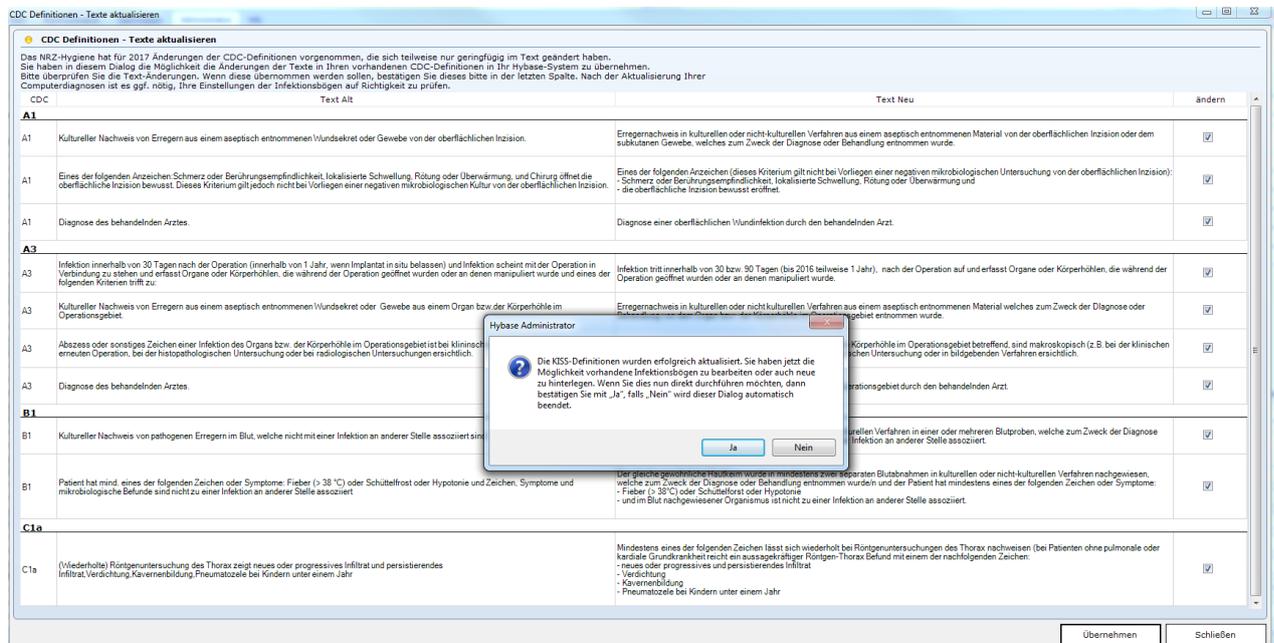

Nachdem die Änderungen vorgenommen wurden, besteht die Möglichkeit die vorhandenen Infektionsbögen zu bearbeiten und die geänderten Definitionen dort zu hinterlegen.


Teil 2

Anpassen der Infektionsbögen (nur bei Bedarf)

Wenn noch nicht vorhanden, muss zunächst ein „Altbogen“ in den Einstellungen für die Infektionserfassung eingerichtet werden.

Einrichten des „Altbogens“


Alte KISS-Definitionen (D1, D2, D3 jeweils mit {11} o.ä. dahinter) müssen in einen neuen Infektionserfassungsbogen „ALTBOGEN“ eingepflegt werden. Dazu kann ein freier Infektionsbogen mittels Doppelklickausgewählt und umbenannt werden.

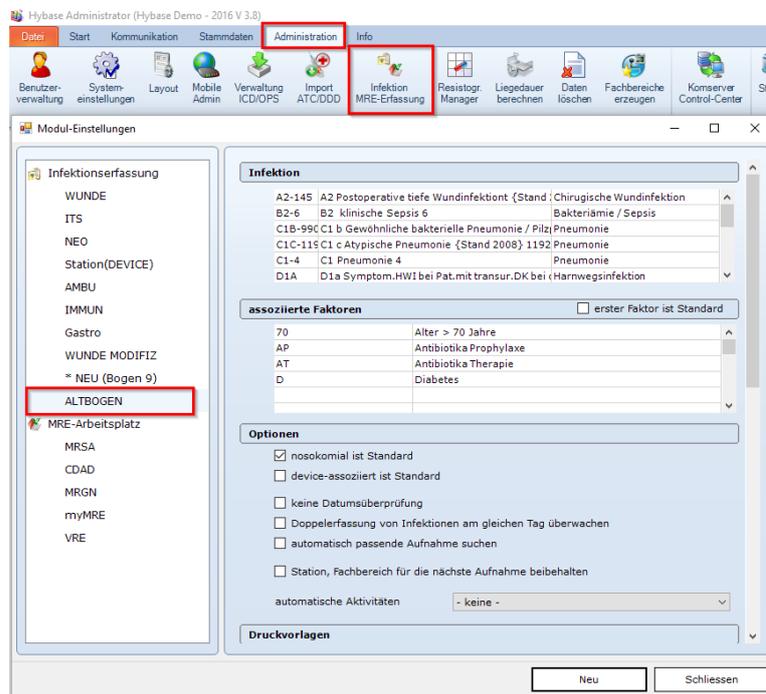

Zusätzlich müssen alle in den alten Infektionserfassungsbögen enthaltenen assoziierten Faktoren in den „Altbogen“ übernommen werden.


Änderung des aktuellen Bogens

In den aktiven Infektionsbogen, z.B. ITS-KISS werden nun die D1 – D3 Definitionen ausgetauscht. Die aktuellen Definitionen tragen keinen Suffix wie z.B. {11} o.ä.

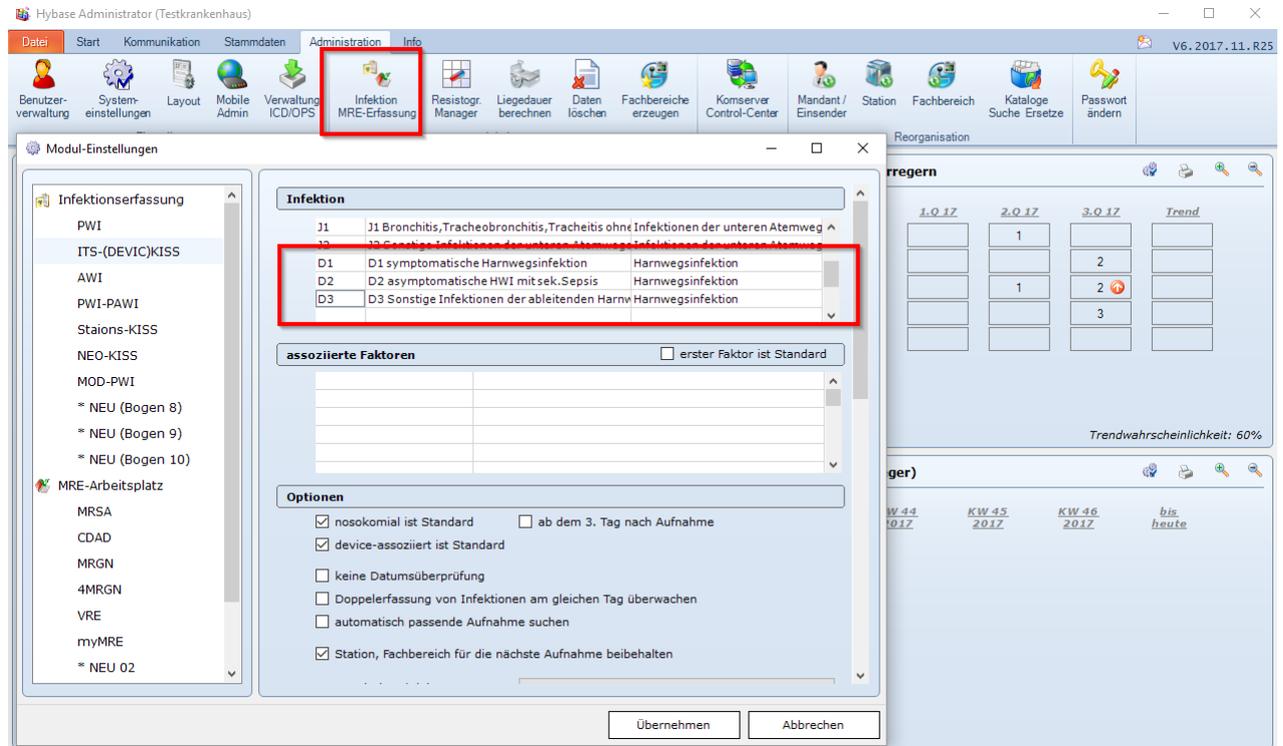

Achtung!

Damit ein Benutzer Dokumentationen aufrufen kann, welche mit CDC-Definitionen vor 2017 dokumentiert wurden, muss in der Benutzerverwaltung (Administration) der erstellte „Altbogen“ für den Benutzer freigeschaltet werden.

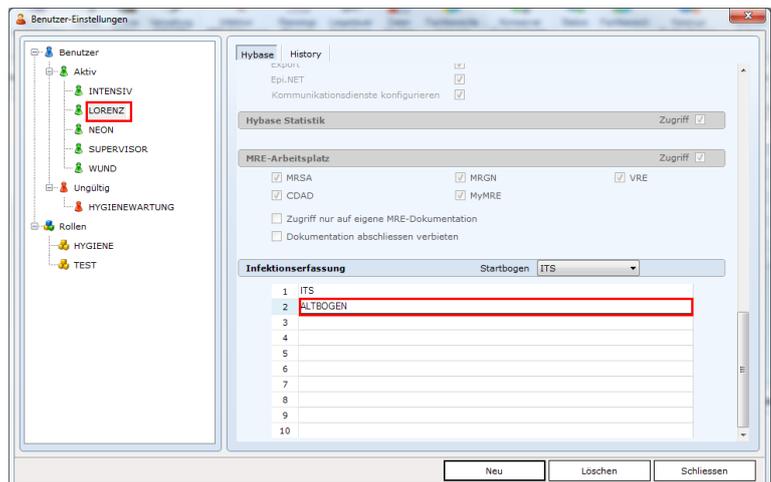

Fertig!

Bei Fragen zum Import oder Probleme bei der Durchführung, wenden Sie sich bitte an Ihre EDV oder den Hybase Support.

Email: support@epinet.de
Tel.: 0234/32 47-200